

## **Serverumzug mit dem „CF Datenbankmanager“ (CfDbBackup.exe) vorbereiten**

Version 2.2

### **1. Vorwort**

Der CF Datenbankmanager muss mindestens in der Version 6.0.0.51 installiert und konfiguriert sein.

Diese Anleitung beschreibt lediglich die Sicherung der Daten von Computer Forum Programmen.

Die Wiederherstellung der Daten auf dem neuen System übernimmt i. d. R. ein Techniker von Computer Forum per Fernwartung. Die dafür anfallende Zeit wird der Praxis nach den aktuell gültigen Stundensätzen in Rechnung gestellt.

Bitte vereinbaren Sie rechtzeitig mit unserer Technikabteilung einen Termin für die Installation unter 04121 / 238 – 120.

### **2. Serverumzug sofort ausführen**

Öffnen Sie im CF Datenbankmanager die Einstellungen über folgenden Button  links oben im Programm. Es öffnen sich die Einstellungen. Klicken Sie nun auf „Diverse Tools“



Hier gibt es eine Rubrik „Serverumzug vorbereiten“. Klicken Sie auf den Button „Ausführen“

**Serverumzug vorbereiten**

Mit diesem Assistenten können Sie einen Serverumzug vorbereiten und alle nötigen Daten von Computer Forum sichern.

Ausführen

Es öffnet sich ein Wizardfenster. Folgen Sie den Anweisungen bis zur letzten Seite. Hier wählen Sie „Jetzt ausführen“ und klicken auf den Button „Serverumzug starten“

Wann soll der Serverumzug vorbereitet werden?

**Jetzt ausführen**

Zeitgesteuert (Task anlegen)

Nach Backup Server deaktivieren? ?

SQL-Sicherung aller Datenbanken überspringen (nicht empfohlen!) ?

Beenden
Zurück...


**Serverumzug starten**

Es werden zuerst alle Datenbanken gesichert, anschließend werden mit Hilfe des Windows-Programms „Robocopy“ alle Ordner und Dateien aus dem Forum-Ordner (bis auf die angegebenen Ausnahmen) kopiert. Soll der alte Server nach der Sicherung automatisch deaktiviert werden, so lassen Sie die Option ausgewählt. Hierbei wird der Postgres-Dienst beendet und deaktiviert, die Freigabe wird entfernt und einige Datenordner werden umbenannt.

In bestimmten Situationen kann die SQL-Sicherung durch aktivieren der Option übersprungen werden. Die Option ist kennwortgeschützt und sollte in der Regel nur von einem Computer Forum Techniker genutzt werden.

**Achten Sie darauf, dass Sie genügend freier Speicher auf dem gewählten Zieldatenträger zur Verfügung steht.**

Der Fortschritt der kompletten Sicherung wird im Wizard angezeigt. Am Ende erscheint ein Hinweisfenster.

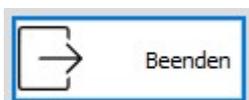

Klicken Sie auf um den Wizard zu schließen.

**3. Serverumzug planen**

Die Vorgehensweise unterscheidet sich zu der sofortigen Ausführung nur in dem letzten Punkt. Klicken Sie auf „Zeitgesteuert (Task anlegen)“ um den Serverumzug zu planen:

Wann soll der Serverumzug vorbereitet werden?

Jetzt ausführen

Zeitgesteuert (Task anlegen)

[Benutzer und Kennwort angeben \(Hier klicken\)](#)

Geben Sie das Datum und die Uhrzeit an. Anschließend klicken Sie auf „Benutzer und Kennwort angeben (Hier klicken)“.

Es erscheint ein Fenster, in dem Sie den Windows-Benutzer und das dazugehörige Kennwort angeben müssen, unter dem dann die geplante Aufgabe ausgeführt wird.

Windows Anmeldedaten angeben

**Bitte geben Sie den Windows-Benutzer und das Kennwort ein**

Benutzername für Arbeitsgruppe:  
<Hostname>\<Benutzer>

Benutzername bei Domäne:  
<Domäne>\<Benutzer>

Benutzername

Kennwort


OK Abbrechen


Nach Bestätigung mit „OK“ klicken Sie auf den Button „Serverumzug starten“.



Wenn die geplante Aufgabe erfolgreich eingerichtet wurde, erscheint folgende Meldung im Wizard:

**Der Task wurde angelegt, das Programm kann jetzt beendet werden**

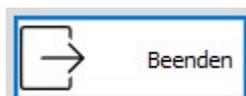

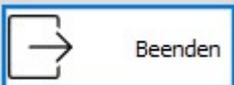Klicken Sie auf  um den Wizard zu schließen.

### **3. Alten Server nach Sicherung manuell deaktivieren**

Möchten Sie den alten Server nach einer Sicherung manuell deaktivieren, lässt sich dieses über das Menü auswählen:

Öffnen Sie im CF Datenbankmanager die Einstellungen über folgenden Button  links oben im Programm.

Es öffnen sich die Einstellungen.

Klicken Sie nun auf „Diverse Tools“

<u>Einstellungen</u>	
<u>Tools für Express-Datenbank</u>	
<u>Tools für DV-Datenbanken</u>	
<u>Tools für EA-Datenbanken</u>	
<u>Tools rund um SQL-Sicherungen</u>	
<b>Tools für Serverumzug</b>	
<u>CF-PGAdmin (nur für CF-Mitarbeiter!)</u>	
<u>Hilfe und Programminformationen</u>	

Hier gibt es eine Rubrik „Server deaktivieren“. Klicken Sie auf den Button „Ausführen“ und bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit „JA“.

### Server deaktivieren

Auf dem Server wird der Postgres-Dienst beendet und deaktiviert, die Forum-Freigabe entfernt und die Datenordner umbenannt.

 **Ausführen**